

慢性的に埋め込み実験で貴重な機器を保護します。
小動物から大型動物までの長期埋め込み慢性実験で、体内から引き出したリード線やコネクター等を動物から保護します。

このジャケットは丈夫な素材布で立体縫製しており、布のズレを防ぐために背骨部分に芯が数カ所入っております。サイズ形状は上半身着用型で、動物に余分なストレスを与えることなく自然な状態での観測を可能にしています。また機器はポケットに入れて保護し、チャックとベルト補強をしています。

犬用




特長

風通しの良いメッシュタイプと、心電の電極をはりつける時の袖付きタイプがあります。

材質: 帆布地 (強度)

- ポケット大付
テレメーター、注入器等比較的大きな機械を保護します。
型式 PJ-P-D01~10
- 袖付 高さ: 約3cm
ECG電極使用に便利です。型式 PJS-D01~10
- メッシュ 標準価格の1.2倍 型式 PJM-D01~10

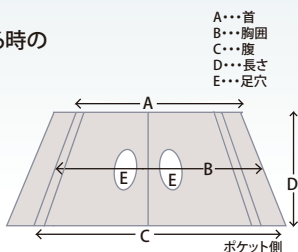

| 号数 | 型式 | 首(A) | 胸囲(B) | 腹(C) | 長さ(D) | ポケット寸法(E) |
|-----|--------|----------|------------|------------|-------|-----------|
| 1号 | PJ-D01 | 24~27(3) | 40~45(5) | 40~46(6) | 27 | 5×23 |
| 2号 | PJ-D02 | 29~32(3) | 46~51(5.5) | 45~52(6) | 28 | 6×24 |
| 3号 | PJ-D03 | 34~37(3) | 52~58(6) | 50~57(7) | 29 | 7×25 |
| 4号 | PJ-D04 | 39~43(4) | 58~65(7) | 55~63(8) | 31 | 9×26 |
| 5号 | PJ-D05 | 44~49(5) | 64~72(8) | 60~70(10) | 33 | 10×27 |
| 6号 | PJ-D06 | 49~54(5) | 70~79(9) | 65~76(11) | 35 | 11×30 |
| 7号 | PJ-D07 | 54~59(6) | 76~86(10) | 70~82(12) | 37 | 12×32 |
| 8号 | PJ-D08 | 59~65(6) | 82~92(10) | 75~88(13) | 39 | 13×34 |
| 9号 | PJ-D09 | 64~71(7) | 88~99(11) | 80~94(14) | 41 | 14×36 |
| 10号 | PJ-D10 | 69~76(7) | 94~106(12) | 85~100(15) | 43 | 16×38 |

スツリングスーツ PJ-SS03

ウサギ用



特長

首が自由に動けるようにしています。後足での耳かき動作でジャケットを切れにくくするため、その部分を特に補強しています。

| 号数 | 型式 | 首囲 | ポケット寸法 |
|----|--------|-------|--------|
| 1 | PJ-B01 | | |
| 3 | PJ-B03 | 21~24 | 7×10 |
| 5 | PJ-B05 | | |

フェレット用



特長

素材に網を使用し、柔らかい動きに対応しています。背すじにズレ防止の芯を入れてあります。

| 号数 | 型式 | 首囲 | ポケット寸法 |
|----|--------|-------|--------|
| 1 | PJ-F01 | | |
| 3 | PJ-F03 | 19~21 | 4×3 |
| 5 | PJ-F05 | | |

キャット用



| 号数 | 型式 | 首囲 | ポケット寸法 |
|----|--------|-------|--------|
| 1 | PC-C01 | | |
| 3 | PJ-C03 | 23~26 | 8×12 |
| 5 | PJ-C05 | | |

ミニブタ用



特長

前足がぬげないように伸縮性素材で少し引っ張りぎみで着用。

| 号数 | 型式 | 首囲 | ポケット寸法 |
|----|---------|-------|--------|
| 1 | PJ-MP01 | | |
| 3 | PJ-MP03 | 54~60 | 14×20 |
| 5 | PJ-MP05 | | |

ラット用



特長

背板にベリリウム銅板を使用し、ポケットとしてアクリル円柱を胴板にネジ止めしています。アクリルフタはネジでしっかり固定され、薄出パイプは軽くて錆びないステンレスを使用しています。パイプには保護ワイヤーがワンタッチで固定できます。



| 号数 | 型式 | 首囲 | ポケット寸法 |
|----|--------|-----|--------------|
| 1 | PJ-R01 | 2 | 19mmφ×12.5mm |
| 3 | PJ-R03 | 2.5 | 24mmφ×15mm |
| 5 | PJ-R05 | 3 | 26mmφ×16.5mm |